

AFTR DC



EN Instructions





NL Instructies

ES Instrucciones

DE Instruktionen

FR Instructions

IT Istruzioni

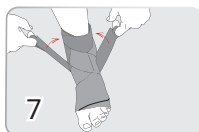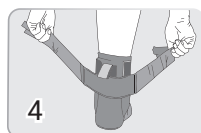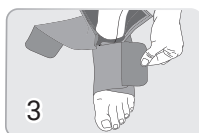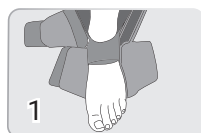

EN **Optional:** Ankle gel pads may be detached and repositioned.

(8) Flaps, ankle collar and Velcro hook strips can be trimmed.

DE **Optional:** Gel-Einlagen für den Knöchel können abgenommen und repositioniert werden.

(8) Schlaufen, Knöchelband und Klettverschluss können zugeschnitten werden.

NL **Facultatief:** U kunt gelkussentjes voor enkel losmaken en verplaatsen.

(8) Flapjes, enkelband en klittenband kunnen worden ingekort.

FR **En option:** les coussinets en gel pour la cheville peuvent être détachés et repositionnés.

(8) Les rabats, le collet de cheville et les bandes velcro peuvent être ajustés.

ES **Opcional:** las almohadillas de gel para tobillo se pueden separar y recolocar.

(8) Las solapas, el collar del tobillo y las cintas de velcro pueden cortarse.

IT **Opzionale:** i cuscinetti in gel per la caviglia si possono staccare e riposizionare.

Le (8) alette, il tutore per la caviglia e le strisce a strappo in velcro si possono rifilare.



EN Hand wash with mild detergent and hang to dry.

DE Per Hand mit mildem Waschmittel waschen und an der Luft trocknen lassen.

NL Handwas, met een mild reinigingsmiddel. Hangend laten drogen.

FR Laver à la main avec un détergent doux et suspendre pour sécher.

ES Lavar a mano con un detergente suave y colgar para que se seque.

IT Lavare a mano con un detergente delicato e stendere.

WARRANTY

BioSkin warranties its products against defects in material and workmanship for 90 days. If you think that your product has a defect, contact us at orders@bioskin.com or 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin gewährt eine 90-tägige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler seiner Produkte. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Produkt einen Mangel hat, kontaktieren Sie uns unter orders@bioskin.com oder 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin garandeert haar producten tegen fabricage- en materiaalfouten gedurende 90 dagen na aankoop. Wanneer u denkt dat uw product defect is, kunt u contact met ons opnemen via orders@bioskin.com of 1-800-541-2455.

GARANTIE

BioSkin garantit ses produits contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 90 jours. Si vous pensez que votre produit présente un défaut, prenez contact avec nous à l'adresse orders@bioskin.com ou au numéro de téléphone 1-800-541-2455.

GARANTÍA

BioSkin garantiza sus productos contra defectos de material y mano de obra durante 90 días. Si cree que su producto tiene un defecto, contáctenos en orders@bioskin.com o llame al 1-800-541-2455.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti BioSkin è valida per 90 giorni su eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Se pensi che il tuo prodotto sia difettoso, contattaci all'indirizzo orders@bioskin.com o al numero 1-800-541-2455.



 240 E. Hersey St., Suite 2, Ashland Oregon 97520, USA

  Trogenstrasse 6, D-72336 Balingen, Germany

02/2020 PN: 12723A ©2020 BioSkin®

BioSkin.com